

# F90 Multirisk - då brandklass 90 minuter krävs

Brandklassat 90 minuter.  
Brandtestat och godkänt enligt EN 14470-1 och uppfyller även i övrigt alla krav i denna standard, såsom självstängande dörrar och brandventiler.

## Kemikalieskåp F90KEM

- Ger 90 minuters brandskydd
- Brandtestat och godkänt enligt EN 14470-1.
- Dörrar som stängs automatiskt vid 50°.
- Till- och frånluftöppningar stängs vid brand.
- Frånluftsstos Ø 100 mm.
- Anslutning för jordning.
- Låsbara dörrar.
- Hyllorna klarar 50 kg jämn belastning.


I MSBs föreskrifter MSBFS 2023:2 framgår bl.a. att: Vid förvaring av brandfarliga vätskor inomhus skall utrymmet vara brandtekniskt avskilt och i övrigt anpassat till förvaringen. Den brandtekniska avskiljningen skall begränsa risken för:

- Brandspridning från förvaringsplatsen till övriga lokaler.
- Brandspridning från andra lokaler till förvaringsplatsen.


Utrymmet skall vara ventilerat.

Invallning skall kunna samla upp minst 10 % av den totalt förvarade volymen, dock alltid den största behållarens volym.


Verkar ni i mycket känslig miljö, önskar högsta brandskyddet eller förvarar mer än 1000 liter brandfarlig vara med flampunkt 30 °C eller lägre i brandcellen, är dessa brandklassade kemikalieskåpen ett utmärkt val.

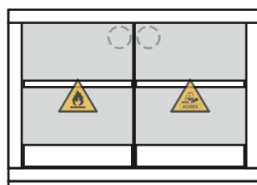


F90KEM2M11  
2 st sektioner

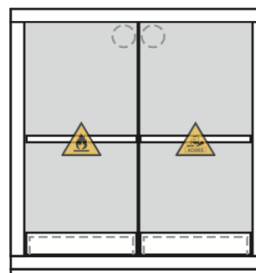


F90KEM3M11  
2 st sektioner

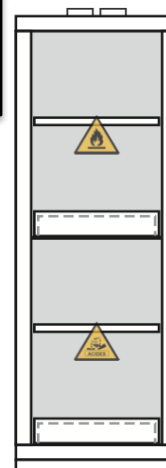


F90KEM4M2  
2 st sektioner

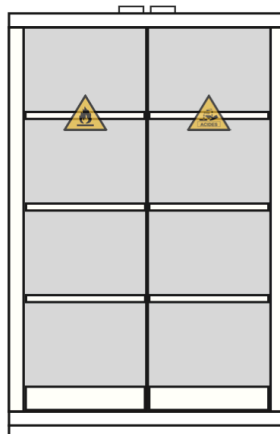

F90KEM5M11  
2 st sektioner

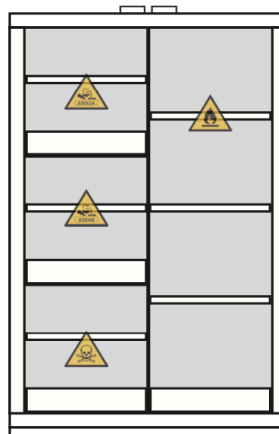

F90KEM5M13  
4 st sektioner

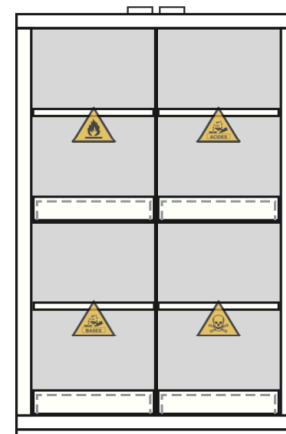

F90KEM5M22  
4 st sektioner

JiWa Multiriskskåp F90 är ett brandklassat kemikalieskåp enligt EN 14470-1 i 90 min.

Vid förvaring av alla kemikalier som ofta används t.ex. inom laboratorium och industrier som bör förvaras isär.

Insidan är uppdelad sektionsvis vilket gör det möjligt att utnyttja skåpen till flera olika områden.

Skåpen är utrustade, beroende på modell, med tråg, hyllor eller perforerad bottenplatta. Går även att inreda efter behov.

\*Vid förvaring av frätande ämnen ska de sektioner där frätande förvaras kompletteras med PVC-insatser.

### F90 Multirisk - Kemikalieskåp F90KEM2M11

Yttermått: H630 x B1137 x D570 mm  
Innermått: H420 x B1000 x D285 mm  
Inredning: 1 flyttbar tråghylla och 1 bottenråg.  
Sektioner: 2 st

Tillbehör: **SE48:** Tråghylla PVC  
**SB48:** Uppsamlingsråg PVC  
**C48:** Perforerad bottenplatta



Ventilation i rygg.  
Ø 100 mm.

### F90 Multirisk - Kemikalieskåp F90KEM3M11

Yttermått: H1100 x B1137 x D670 mm  
Innermått: H820 x B(2 x 490) x D410 mm  
Inredning: 2 flyttbar tråghylla och 2 bottenråg.  
Sektioner: 2 st

Tillbehör: **SE48:** Tråghylla PVC  
**SB48:** Uppsamlingsråg PVC  
**C48:** Perforerad bottenplatta



Ventilation i rygg.  
Ø 100 mm.

### F90 Multirisk - Kemikalieskåp F90KEM4M2

Yttermått: H1950 x B635 x D620 mm  
Innermått: H(2 x 800) x B490 x D410 mm  
Inredning: 2 flyttbara tråghyllor och 2 bottenråg.  
Sektioner: 2 st

Tillbehör: **SE48:** Tråghylla PVC  
**SB48:** Uppsamlingsråg PVC  
**C48:** Perforerad bottenplatta



Ventilation i tak.  
Ø 100 mm.

### F90 Multirisk - Kemikalieskåp F90KEM5M11

Yttermått: H1950 x B1137 x D620 mm  
Innermått: H1620 x B(2 x 490) x D410 mm  
Inredning: 6 flyttbara tråghyllor och 2 bottenråg.  
Sektioner: 2 st

Tillbehör: **SE48:** Tråghylla PVC  
**SB48:** Uppsamlingsråg PVC  
**C48:** Perforerad bottenplatta



Ventilation i tak.  
Ø 100 mm.

### F90 Multirisk - Kemikalieskåp F90KEM5M13

Yttermått: H1950 x B1137 x D620 mm  
Innermått: H1620x490x410x B(3 x 533)x490xD410 mm  
Inredning: 6 flyttbara tråghyllor och 4 bottenråg.  
Sektioner: 4 st

Tillbehör: **SE48:** Tråghylla PVC  
**SB48:** Uppsamlingsråg PVC  
**C48:** Perforerad bottenplatta



Ventilation i tak.  
Ø 100 mm.

### F90 Multirisk - Kemikalieskåp F90KEM5M22

Yttermått: H1950 x B1137 x D620 mm  
Innermått: H(2 x 800)x B(2 x 490) x D410 mm  
Inredning: 4 flyttbara tråghyllor och 4 bottenråg.  
Sektioner: 4 st

Tillbehör: **SE48:** Tråghylla PVC  
**SB48:** Uppsamlingsråg PVC  
**C48:** Perforerad bottenplatta



Ventilation i tak.  
Ø 100 mm.



Jinvall Inredningar AB  
Danska vägen 23  
412 74 GÖTEBORG

Tel: +46 (0)31-335 90 80  
Fax: +46 (0)31-40 86 35

E-mail: [ta@jiwa.se](mailto:ta@jiwa.se)  
[www.jiwa.se](http://www.jiwa.se)